


ERSTE HILFE

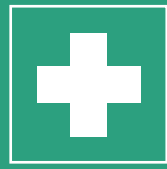

SICHERHEIT SCHAFFEN
MIT SCHNELLER UND
EFFEKTIVER ERSTEN HILFE

Augenspülungen
Pflaster
Erste-Hilfe Stationen

plum

Erste-Hilfe Konzepte für Ihren Arbeitsplatz

Mit den Produkten von Plum wird schnelle und effektive Erste-Hilfe an Ihrem Arbeitsplatz sichergestellt. Dadurch können das Ausmaß der Verletzung und die damit verbundenen Folgen begrenzt werden.



Jeden Tag passieren kleinere und größere Unfälle. Daher ist es wichtig, immer Erste-Hilfe-Material zur Hand zu haben – im Idealfall dort, wo der Unfall geschieht. Wir bieten Ihnen eine große Auswahl an Erste-Hilfe Produkten für die schnelle, sichere und hygienische Versorgung von Augen- und Schnittverletzungen sowie kleineren Wunden. Damit die Erste-Hilfe immer griffbereit zur Verfügung steht, haben wir sowohl stationäre als auch mobile Lösungen entwickelt.

MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN FÜR SCHNELLE UND EFFEKTIVE HILFE

Unsere Erste-Hilfe-Produkte umfassen Pflaster, Wundreinigungstücher und eine große Produktauswahl an Augenspüllösungen. Sie können die Produkte nach Ihren Wünschen zusammenstellen. Das Wichtigste dabei ist, dass die ausgewählten Erste-Hilfe-Produkte genau die Unfälle abdecken, die in Ihrer Branche, an Ihrem Arbeitsplatz oder in Ihrer Abteilung auftreten können.

” GROSSTEIL DES SEHVERMÖGENS VERLOREN

Die Hanstholm Fischmehl-Fabrik verfügt über hochmoderne Produktionsanlagen. Bis zu jenem folgenschweren Unfall eines Mitarbeiters umfasste die Erste-Hilfe-Ausstattung nur gewöhnliche Augenspüllflaschen. „Eine Dichtung löste sich und austretende Lauge traf beide Augen. Als Folge verlor der Mechaniker einen Großteil seines Sehvermögens. Hätten wir pH Neutral Duo im Einsatz gehabt, würde unser Mitarbeiter wohl noch beide Augen benutzen können“ berichtet Ronni Jørgensen.



Die grüne Augenspülflasche entfernt Schmutz und Fremdkörper aus dem Auge

Die blaue pH Neutral wird zur Neutralisation von Säuren und Basen eingesetzt.

Leicht zusammenrückbare Flaschen, die sich einfach mit einem weichen Strahl entleeren lassen.

Übersichtliche Piktogramme erklären deutlich die Anwendung des Produktes.

Ergonomisch geformte weiche Augenschale. Leicht zusammendrücken, bevor die Augenschale auf das Auge gesetzt wird. Dadurch wird das Auge offengehalten und eine gleichmäßige, weiche Spülung kann erfolgen.



Schnell und leicht zu öffnen. Spülkopf in Pfeilrichtung drehen, bis die Versiegelung bricht. Die Flasche ist dann sofort einsatzbereit.



Unsere Flaschen haben eine Haltbarkeit von 3 Jahren. Das Haltbarkeitsdatum steht deutlich auf dem Etikett

Mit dem DUO Augenspülaufsatz können beide Augen gleichzeitig gespült werden. Der Aufsatz unterstützt das Offenhalten der Augen und sorgt für eine gleichmäßige, weiche Spülung

Umfangreiches Augenspülkonzept

Die grüne Plum Augenspülflasche entfernt Fremdkörper, mit der blauen pH Neutral werden Säuren und alkalische Substanzen neutralisiert.

SIE HABEN NUR ZWEI AUGEN – PASSEN SIE GUT DARAUF AUF!

Unser Sehvermögen ist für die meisten Tätigkeiten von entscheidender Bedeutung – daher sollten Sie auf Ihre Augen achten. Eine gute Pflege und der gesunde Menschenverstand sind jedoch leider nicht immer genug, denn niemand kann sich vor Unfällen schützen. Sie können aber etwas dafür tun, um sich darauf vorzubereiten. Mit unseren Augenspüllösungen sind Sie bestmöglich versorgt.

EIN WICHTIGER MOMENT

Bei einem Unfall können wenige Sekunden darüber entscheiden, ob Ihr Augenlicht beeinträchtigt wird. Daher ist der schnelle Zugang zu einer Augenspüllösung wichtig – an allen Arbeitsplätzen, wo ein Risiko für Augenverletzungen besteht.

AUGENSPÜLLÖSUNGEN MIT BREITEM PRODUKTSORTIMENT

Die Plum Augenspüllösung ist zum Ausspülen von Fremdkörpern aus dem Auge bestimmt und die pH Neutral Augenspüllösung für die Neutralisierung von Säuren und einer Vielzahl von alkalischen Substanzen. Die große Produktauswahl garantiert, dass Sie eine optimale Lösung, die Ihren persönlichen Anforderungen gerecht wird, bei uns erhalten. Stationen in verschiedenen Größen für die Wandmontage am direkt gefährdeten Arbeitsplatz, Gürteltasche zum Mitführen am Körper oder auch kleine handliche Lösungen für den mobilen Einsatz im LKW, Werkzeugkasten, Handschuhfach, Erste-Hilfe Kästen.



Hinweis: Für die Flaschen liegt eine CE Kennzeichnung vor. Alle Plum Augenspülflaschen entsprechen der DIN EN 15154-4 (Augenduschen ohne Wasseranschluss). Die Herstellung erfolgt nach dem Medizinproduktegesetz.



So beugen Sie Augenschäden vor

Die Plum Augenspüllösung spült Fremdkörper, Staub und Schmutz aus den Augen und pH Neutral neutralisiert Säuren und Laugen.

IN ZUSAMMENARBEIT MIT AUGENÄRZTEN ENTWICKELT

Wir haben unser Augenspülkonzept in enger Zusammenarbeit mit führenden Augenärzten entwickelt. Dies bedeutet, dass unsere Produkte bis ins kleinste Detail durchdacht sind. Die Augenspülflaschen sind einfach anzuwenden.

Übersichtliche Piktogramme erklären deutlich die richtige Anwendung und speziell entwickelte Augenschalen helfen, die Augen bei der Spülung offenzuhalten. Dadurch wird die Spülung mit einem gleichmäßigen weichen Strahl sichergestellt.



Nehmen Sie die Flasche aus der Box



Drehen Sie die Augenschale bis die Versiegelung bricht



Den Kopf zurücklehnen, Flasche leicht zusammendrücken und spülen



Oder mit vorgebeugtem Kopf die Augen von unten spülen

DIE FOLGENDE ÜBERSICHT ZEIGT IHNEN DIE RICHTIGE SPÜLLÖSUNG UND SPÜLZEIT FÜR UNTERSCHIEDLICHE SCHMUTZ- UND SCHADSTOFFEINWIRKUNGEN.

1	2	3	4
Bestimmen Sie den Schadstoff	Wählen Sie die richtige Flasche und Spüllösung	Setzen Sie die Spülung fort	Spülen Sie wie angegeben
Fremdkörper z.B. Staub, Schmutz, Metall- und Holzsplitter	Plum Augenspüllösung	Plum Augenspüllösung	Solange spülen, bis die Fremdkörper herausgespült sind.
Säuren	pH Neutral	Plum Augenspüllösung	Augen mit pH Neutral 2 Minuten spülen, bis die Flasche entleert ist. Die Spülung mit der Plum Augenspüllösung bis zur ärztlichen Behandlung fortsetzen.
Basen	pH Neutral	Plum Augenspüllösung	Augen mit pH Neutral 2 Minuten spülen, bis die Flasche entleert ist. Die Spülung mit der Plum Augenspüllösung bis zur ärztlichen Behandlung fortsetzen.
Andere Chemikalien (z.B. Lösungsmittel und Öle)	Plum Augenspüllösung	Plum Augenspüllösung	Augen solange spülen, bis das unangenehme Gefühl nicht mehr spürbar ist. Die Spülung mit der Plum Augenspüllösung bis zur ärztlichen Behandlung fortsetzen.
Chemikalien auf der Haut	pH Neutral	Plum Augenspüllösung	Haut mit pH Neutral 2 Minuten spülen, bis die Flasche entleert ist. Die Spülung mit der Plum Augenspüllösung bis zur ärztlichen Behandlung fortsetzen.

Wichtig: Bei allen Schäden soll das Auge mit einem weichen und gleichmäßigen Strahl gespült werden. Die Augenspülflasche während des Spülvorgangs nur leicht zusammendrücken. Ärztlicher Rat ist bei jeder Augenverletzung oder Verschmutzung einzuholen. Die Spülung sollte während des Transports zum Arzt fortgeführt werden.



Spülen Sie beide Augen gleichzeitig mit Plum DUO

Die grüne Plum Augenspülflasche entfernt Fremdkörper, mit der blauen pH Neutral werden Säuren und alkalische Substanzen neutralisiert.

BEI EINER VIELZAHL VON AUGENUNFÄLLEN SIND BEIDE AUGEN BETROFFEN

Die Erfahrungen zeigen, dass bei Augenunfällen mit Chemikalien häufig beide Augen betroffen sind. Mit den Plum DUO Augenspülflaschen können Sie beide Augen gleichzeitig spülen.

AUGENSPÜLAUFSATZ ZUR OPTIMALEN SPÜLUNG

Besonders bei Augenunfällen mit Säuren oder Alkali ist die Zeit ein wesentlicher Faktor. Maßgebend für die Schwere der Verletzung ist die Konzentration der Chemikalie sowie dessen Kontaktdauer. Deshalb ist es für eine optimale Erste-Hilfe notwendig, die Chemikalie so schnell wie möglich zu neutralisieren. Sollten beide Augen betroffen sein, sollte auf jeden Fall pH Neutral DUO eingesetzt werden.

Speziell geformte Augenaufsätze helfen die Augenlider während der Spülung offenzuhalten und ermöglichen dadurch eine weiche, gleichmäßige Spülung und ein korrekte Spülzeit. Die richtigen Spülzeiten können Sie aus der Tabelle auf der vorherigen Seite entnehmen.

Alle unsere Augenspülflaschen sind nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt, um jederzeit eine sterile Spülung sicherzustellen.

plum



Augenspülung bei Fremdkörpern

Plum Augenspülung bietet Ihnen eine optimale Hilfe, wenn Schmutz, Staub, Splitter und andere Fremdkörper ins Auge gelangen.

Die Plum Augenspülflaschen enthalten eine sterile 0,9% Natriumchloridlösung, die dem natürlichen Salzgehalt des Auges entspricht. Die Produktpalette ist sorgfältig aufgebaut - von der kleinen handlichen Flasche, die Sie immer mit sich führen können, bis hin zu Wandstationen, die Erste-Hilfe im Notfall für Sie leicht zugänglich machen.

Erste-Hilfe ist zugleich doppelte Hilfe! Eine sofortige Spülung nach einem Augenunfall soll dazu führen, dass Fremdkörper sich nicht im Auge festsetzen und schwere Augenschäden verursachen.



**200 ML
PLUM AUGENSPÜLLÖSUNG**

Handliche Flasche mit steriler Natriumchloridlösung (0,9%). Für den mobilen Einsatz z.B. im Werkzeugkasten, Erste-Hilfe Kasten und Aufbewahrung in einer speziell hierfür lieferbaren Gürteltasche. Lieferung mit Staubkappe.

Spülzeit	ca. 2 Min.
Versandeinheit:	10 x 200 ml
Art.-Nr.:	4691
PZN:	4397388



**500 ML
PLUM AUGENSPÜLLÖSUNG**

Flasche mit steriler Natriumchloridlösung (0,9%). Die Flasche ist sowohl zur Nachfüllung der Augenspülstationen und Quick-Safe Boxen sowie für den Einzeleinsatz am Arbeitsplatz geeignet. Lieferung mit Staubkappe.

Spülzeit	ca. 5 Min.
Versandeinheit:	12 x 500 ml
Art.-Nr.:	4604
PZN:	4397402



**1000 ML
PLUM AUGENSPÜLLÖSUNG**

Flasche mit steriler Natriumchloridlösung (0,9%). Der Inhalt von 1000 ml ermöglicht eine verlängerte Spülzeit. Die Flasche ist zur Nachfüllung der Augenspülstation Maxi und für den Einzeleinsatz geeignet. Lieferung mit Staubkappe.

Spülzeit	ca. 10 Min.
Versandeinheit:	6 x 1000 ml
Art.-Nr.:	4707
PZN:	3099111



**500 ML
PLUM AUGENSPÜLLÖSUNG DUO**

Flasche mit steriler Natriumchloridlösung (0,9%). Der spezielle Augenaufsatz ermöglicht das gleichzeitige Spülen beider Augen. Die Flasche ist sowohl zur Nachfüllung der Augenspülstationen DUO und QuickSafe Boxen sowie für den Einzeleinsatz am Arbeitsplatz geeignet.

Spülzeit	ca. 2 Min.
Versandeinheit:	6 x 500 ml
Art.-Nr.:	4861
PZN:	10249858



**1000 ML
PLUM AUGENSPÜLLÖSUNG DUO**

Flasche mit steriler Natriumchloridlösung (0,9%). Der Inhalt von 1000 ml ermöglicht eine verlängerte Spülzeit. Die Flasche ist sowohl zur Nachfüllung der Augenspülstationen DUO sowie für den Einzeleinsatz am Arbeitsplatz geeignet.

Spülzeit	ca. 5 Min.
Versandeinheit:	6 x 1000 ml
Art.-Nr.:	4800
PZN:	6134546



**3 X 500 ML
PLUM AUGENSPÜLLÖSUNG**

Praktischer und handlicher Displaykarton mit Tragegriff, ideal für den mobilen Einsatz. Beinhaltet 3 Stk. 500 ml Plum Augenspüllösungen mit steriler Natriumchloridlösung (0,9%). Die Flaschen sind ebenfalls zur Nachfüllung der Augenspülstationen und QuickSafe Boxen sowie Einzeleinsatz geeignet. Lieferung mit Staubkappen.

Spülzeit	ca. 5 Min. je Flasche
Versandeinheit:	4 x 3 x 500 ml
Art.-Nr.:	4620
PZN:	10306384

ph Neutral kann Ihr Augenlicht retten

Unsere Augenspüllösung pH Neutral für die schnelle Neutralisierung von Säuren und Alkali bietet dokumentierte Sicherheit und Wirksamkeit.

WICHTIG

Informationen zu Flusssäure
Flusssäure ist eine Säure, die giftig und stark ätzend auf Haut und Knochen wirkt. Unsere Spüllösungen können diese ätzende Wirkung nicht begrenzen. Daher wird der Einsatz von pH Neutral und Plum Augenspülung bei Unfällen mit Flusssäure NICHT empfohlen.

DIE EMPFOHLENE ANWENDUNG VON PH NEUTRAL

pH Neutral ist als Erste-Hilfe Maßnahme für die Notfallspülung mit einer Spüldauer von 2 Minuten bestimmt. Ziel bei der Spülung mit einer Flasche pH Neutral ist es, den pH Wert so schnell wie möglich wieder auf ein unbedenkliches Niveau einzustellen, wenn Säuren oder Alkali mit dem Auge oder der Haut in Kontakt kommen. Zur Fortsetzung der Spülung auf dem Weg zum Arzt wird der Einsatz der Plum Augenspüllösung mit 0,9 % Natriumchloridlösung empfohlen. Ärztlicher Rat ist bei jeder Augenverletzung einzuholen.

GEFÄHRLICHE CHEMIKALIEN GIBT ES ÜBERALL

In vielen Arbeitsbereichen, in Unternehmen und in den unterschiedlichsten Branchen sind Sie der Gefahr ausgesetzt, einen Augenunfall durch Chemikalien zu erleiden. An Flughäfen, in Chemieanlagen, in der Recyclingindustrie, in Zementfabriken und auf Baustellen, im Bergbau oder in der Lebensmittel-, Metall- und Papierindustrie. Überall dort, wo starke Säuren und Alkali in der Herstellung und Reinigung eingesetzt werden. Es besteht immer das Risiko, dass etwas schief geht. Dichtungen können sich lösen oder eine Batterie kann explodieren. Deshalb sollte immer pH Neutral als Erste-Hilfe Maßnahme zur Augenspülung griffbereit zur Verfügung stehen.

WENIGE SEKUNDEN KÖNNEN ENTSCHEIDEND SEIN

Säuren und Alkali schädigen die Struktur der Haut und der Schleimhäute. Bei einem Unfall ist es erforderlich, die Substanz schnellstmöglich auf das Niveau des normalen pH Wertes von 7,4 zu neutralisieren. Der Effekt ist dabei am größten, wenn Säuren und Alkali noch nicht tiefer in das Gewebe eingedrungen sind. Wichtig ist bei Augenunfällen, dass die Hornhaut nicht beschädigt wird. Um größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten, muss die Augenspülung folgende Eigenschaften aufweisen:

- Leichte Zugänglichkeit
- Schnell zu bedienen
- Wirksam

MASSGEBEND FÜR DIE SCHWERE DER JEWEILIGEN VERLETZUNG SIND HAUPTSÄCHLICH:


Konzentration der Chemikalie – starke Säuren und Alkali haben größeres Verätzungspotential. Temperatur – eine hohe Temperatur verstärkt die Verätzungseigenschaften von Chemikalien. Kontaktdauer – je tiefer die Durchdringung, desto größer die Gefahr schwerer Verletzungen.

DIE AUGENSPÜLLÖSUNG MUSS WIRKSAM SEIN

pH Neutral ist ein wirksamer Phosphatpuffer (4,9%), der bei Säuren und einer Vielzahl von alkalischen Substanzen neutralisierend wirkt. Die Flüssigkeit besteht aus Phosphatsalzen, die natürliche Bestandteile des Körpers sind. Im sauren Bereich wird der Pufferbestandteil Hydrogenphosphat durch die chemische Reaktion wirksam. Die häufig noch gefährlicheren Hydroxidionen (alkalisch) reagieren mit dem zweiten Pufferbestandteil Dihydrogenphosphat.

Die Wirkung von pH Neutral wird auch durch wissenschaftliche Studien bestätigt.^{1) 2)}

Abbildung 1: Neutralisierungseffekt von pH Neutral und 0,9% Natriumchloridlösung *

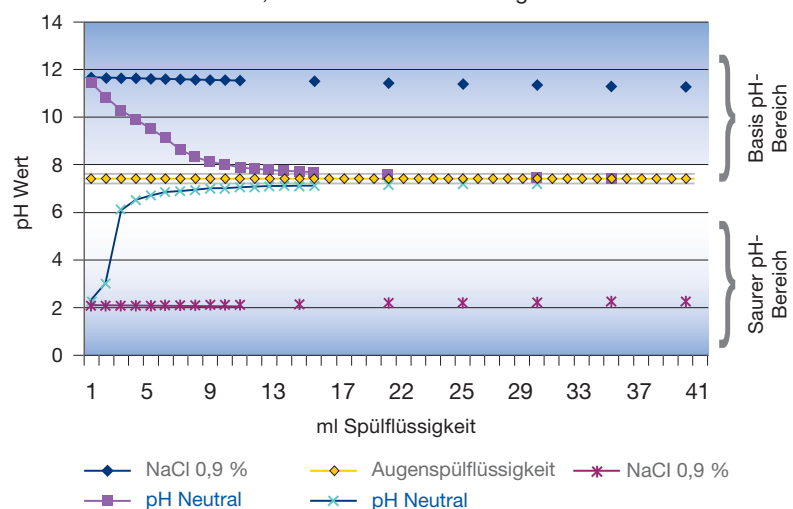

* Es handelt sich hierbei um eine von Plum A/S durchgeführte Titrationsanalyse im Labor (in vitro Test). Hierbei wurde die Flüssigkeit pH Neutral und 0,9 % Natriumchloridlösung schrittweise einer Lösung mit 1 Tropfen Schwefelsäure + 40 ml Leitungswasser bzw. 1 Tropfen Kaliumhydroxid + 40 ml Leitungswasser zugeführt. Die Änderungen des pH Wertes und die dafür erforderlichen Mengen von Spüllüssigkeit wurden für die Beurteilung des Effektes herangezogen.

1: Prof. Dr. med. Schrage N.F., Facharzt für Augenheilkunde an der Augenklinik Merheim, Ostmerheimer Str. 200 in 51109 Köln, in Kooperation mit dem Aachener Centrum für Technologietransfer in der Ophthalmologie ACTO, Geschäftsstelle Karlsburgweg 9 in 52070 Aachen, Vortrag: Augenverätzungen - Was gibt es Neues? Regionalforum Arbeitsmedizin, Stuttgart 23.02.2006, Folien 44 ff.

2: Prof. Dr. med. Schrage N.F., Facharzt für Augenheilkunde an der Augenklinik Merheim, Ostmerheimer Str. 200 in 51109 Köln, in Kooperation mit dem Aachener Centrum für Technologietransfer in der Ophthalmologie ACTO, Geschäftsstelle Karlsburgweg 9 in 52070 Aachen, Vergleichsergebnisse von pH Neutral an verätzten Augen, Spülversuche an mit NaOH verätzten Kanichenaugen im Vergleich von Plum pH Neutral mit physiologischer Kochsalzlösung, 24.05.2005.



200 ML PH NEUTRAL

Handliche Flasche mit steriler Phosphatpufferlösung (4,9%). Für die schnelle Neutralisierung von Säuren und Alkali. Für den mobilen Einsatz z. B. im Werkzeugkasten, Erste-Hilfe Kasten und Aufbewahrung in einer speziell hierfür lieferbaren Gürteltasche. Auch für die Nachfüllung der Augen-Notfallstationen und QuickSafe Boxen geeignet. Lieferung mit Staubkappe.

Spülzeit:	ca. 2 Min.
Versandeinheit:	10 x 200 ml
Art.-Nr.:	4752
PZN:	4397394



500 ML PH NEUTRAL DUO

Sterile 4,9 % Phosphatpufferlösung. Für die schnelle Neutralisierung von Säuren und Alkali. Ausgestattet mit einem Augenaufsatz zum gleichzeitigen Spülen beider Augen. Zum Einzeleinsatz und auch zur Nachfüllung der Augen-Notfallstation DUO und QuickSafe Boxen geeignet.

Spülzeit:	ca. 2 Min.
Versandeinheit:	6 x 500 ml
Art.-Nr.:	4801
PZN:	6134552



1000 ML PH NEUTRAL

Flasche mit steriler Phosphatpufferlösung (4,9%), Für die schnelle Neutralisierung von Säuren und Alkali auf der Haut. Ausgestattet mit einem speziellen Sprühkopf, der eine gleichmäßige Verteilung der Flüssigkeit über eine große Körperfläche gewährleistet. Kann auf dem Arbeitstisch abgestellt oder im Werkzeugkasten und LKW mitgeführt werden. Auch für die Nachfüllung der Station geeignet. Lieferung mit Staubkappe.

Spülzeit:	ca. 2 Min.
Versandeinheit:	6 x 1000 ml
Art.-Nr.:	4746
PZN:	64397419



„ UNFÄLLE MIT SÄUREN UND BASEN PASSIEREN DANN, WENN MAN ES AM WENIGSTEN ERWARTET.

pH Neutral DUO rettete einem Mitarbeiter bei SITA France das Augenlicht. Beim Sortieren von Abfall spritzte dem Mitarbeiter aus einer Plastikflasche ein Rest Reinigungsmittel in die Augen. Durch die sofortige Spülung mit pH Neutral DUO konnte der Schadstoff neutralisiert werden, und der Mitarbeiter kehrte bereits am nächsten Tag an seinen Arbeitsplatz zurück.



Erste-Hilfe muss sichtbar und schnell zugänglich sein

Deshalb können unsere Erste-Hilfe-Produkte an der Wand direkt am gefährdeten Arbeitsplatz montiert werden.

PLUM AUGENSPÜLSTATION DUO

Staubgeschützte Wandbox aus Polystyrol mit 2 x 1000 ml Plum Augenspülflaschen DUO und innenseitigem Spiegel. Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Fremdkörper in die Augen gelangen können. Die Flaschen werden sicher vor Staub und Schmutz geschützt. Einfache Montage.

Spülzeit:	ca. 10 Min.
Versandeinheit:	1 Stk.
Art.-Nr.:	4816
Maße:	H: 357 x B: 252 x T: 116 mm
PZN:	6585272

ERSTE-HILFE MUSS ERNST GENOMMEN WERDEN

Die unterschiedlichen Stationen von Plum ermöglichen es Ihnen, im Notfall die Erste-Hilfe-Produkte schnell zur Hand zu haben. Dadurch ist die Erste-Hilfe leicht zugänglich und systematisiert. Verwenden Sie an Arbeitsplätzen mit einem hohen Staubaufkommen unsere staubgeschützten Wandboxen, um die Flaschen vor Verschmutzungen zu bewahren.

Mit einer an der Wand montierten Augenspülstation ist sichergestellt, dass die Mitarbeiter schnell versorgt werden können. Bevorraten Sie immer zusätzliche Flaschen, damit auf dem Weg zum Arzt ausreichend weitergespült werden kann.



200 ML PLUM AUGENSPÜLUNG IM EINZELKARTON

Handliche Flasche mit steriler Natriumchloridlösung (0,9 %) im geschützten Einzelkarton. Der robuste und praktische Einzelkarton lässt sich zur Entnahme der Flasche leicht und schnell öffnen. Für den mobilen Einsatz z. B. im Werkzeugkasten, Fahrzeugen, bei Gefahrguttransporten etc.

Spülzeit:	ca. 2 Min.
Versandeinheit:	10 Stk.
Art.-Nr.:	4695
Maße:	H: 58 x B: 58 x T: 163 mm
PZN:	11535388



500 ML PLUM AUGENSPÜLUNG IM EINZELKARTON

Flasche mit steriler Natriumchloridlösung (0,9 %) im geschützten Einzelkarton. Der robuste und praktische Einzelkarton lässt sich zur Entnahme der Flasche leicht und schnell öffnen. Zur Nachfüllung der Augenspülstationen und für den Einzeleinsatz geeignet. Der Einzelkarton ist auch mit einer passenden Wandhalterung erhältlich.

Spülzeit:	ca. 5 Min.
Versandeinheit:	12 Stk.
Art.-Nr. Einzelkarton:	4605
Art.-Nr. Einzelkarton m. Wandhalterung:	4609
Maße:	H: 79 x B: 79 x T: 214 mm
PZN 4605:	11535371
PZN 4909:	11535402



PLUM AUGENSPÜLSTATION DUO

Wandstation mit 1 x 1000 ml Plum Augenspülflasche DUO, Wandhalterung, beiliegendem Piktogramm und Spiegel. Für die schnelle und gleichzeitige Spülung beider Augen an kleineren Arbeitsplätzen. Einfache Montage.

Spülzeit:	ca. 5 Min.
Versandeinheit:	1 Stk.
Art.-Nr.:	4802
Maße:	H: 375 x B: 180 x T: 95 mm
PZN:	6134575



PLUM AUGENSPÜLSTATION IN WANDBOX

Staubgeschützte Wandbox aus Polystyrol mit 2 x 500 ml Plum Augenspülflaschen und innenseitigem Spiegel. Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Fremdkörper in das Auge gelangen können. Die Flaschen werden sicher vor Staub und Schmutz geschützt. Einfache Montage.

Spülzeit: ca. 10 Min.
Versandeinheit: 1 Stk.
Art.-Nr.: 4650
Maße: H: 280 x B: 230 x T: 110 mm
PZN: 4397448

BEHEIZBARE AUGENSPÜLWANDBOX

Mit einem integrierten Heizelement wird der Einsatz der Augenspülflaschen auch im Niedrigtemperaturbereich und bei Frost möglich. Nähere Informationen hierzu auf Anfrage.

Spülzeit: ca. 10 Min.
Versandeinheit: 1 Stk.
Art.-Nr.: 4649
Maße: H: 280 x B: 230 x T: 110 mm



PLUM AUGENSPÜLSTATION

Wandstation mit 1 x 500 ml Plum Augenspülflasche, Wandhalterung und beiliegenderm Piktogramm. Besonders für eine jederzeit schnell verfügbare Augenspülung an kleineren Arbeitsplätzen geeignet. Einfache Montage.

Spülzeit: ca. 5 Min.
Versandeinheit: 1 Stk.
Art.-Nr.: 4611
Maße: H: 300 x B: 170 x T: 80 mm
PZN: 4397425



PLUM AUGENSPÜLSTATION MAXI

Wandstation mit 2 x 1000 ml Plum Augenspülflaschen, Wandhalterung und Piktogramm mit Spiegel. Die Station ermöglicht eine Spülzeit von insgesamt ca. 20 Minuten und ist besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo eine längere Spülzeit erforderlich ist. Einfache Montage.

Spülzeit: ca. 20 Min.
Versandeinheit: 1 Stk.
Art.-Nr.: 4708
Maße: H: 375 x B: 26 x T: 95 mm
PZN: 3128893



PLUM AUGENSPÜLSTATION

Wandstation mit 2 x 500 ml Plum Augenspülflaschen, Wandhalterung, integriertem Piktogramm und Spiegel. Speziell entwickelt für Arbeitsplätze, wo eine längere Spülzeit erforderlich ist. Einfache Montage.

Spülzeit: ca. 10 Min.
Versandeinheit: 1 Stk.
Art.-Nr.: 4694
Maße: H: 290 x B: 228 x T: 80 mm
PZN: 4397431





Optimaler Schutz

Mit unseren Notfallstationen sind Sie optimal abgesichert – sowohl gegen Unfälle mit Fremdkörpern als auch gegen Schäden durch Säuren und Alkali

Plötzlich löst sich ein Schlauch oder ein Rohr platzt. Dadurch können chemische Substanzen austreten und in das Auge spritzen. Nun zählen Sekunden, um das Augenlicht des Mitarbeiters zu retten.

PLUM AUGENSPÜLUNG SINNVOLLE ERGÄNZUNG FÜR PH NEUTRAL

Bei Augenunfällen durch Säuren oder Alkali empfehlen wir eine kombinierte Spülung.

Zuerst wird als Erste-Hilfe Maßnahme mit pH Neutral neutralisiert und anschließend sollte die Spülung mit Plum Augenspülung auf dem Weg zum Arzt fortgesetzt werden. Wir haben deshalb eine Auswahl von Notfallstationen zusammengestellt, die dieser Empfehlung gerecht werden.

Sollten Sie vermehrt mit flüssigen Schadstoffen arbeiten, empfehlen wir den Einsatz unserer pH Neutral DUO mit der Sie im Notfall gleichzeitig beide Augen spülen können. Beachten Sie, dass Sie mit unserer Notduschestation (4741) Säuren und Alkali auf der Haut neutralisieren können.



200 ML PH NEUTRAL IM EINZELKARTON

Handliche Flasche mit steriler Phosphatpufferlösung (4.9 %) im geschützten Einzelkarton. Der robuste und praktische Einzelkarton lässt sich zur Entnahme der Flasche leicht und schnell öffnen. Für die schnelle Neutralisierung von Säuren und Alkali. Zur Nachfüllung der Augenspülstationen und für den mobilen Einsatz geeignet.

Spülzeit:	ca. 2 Min.
Versandeinheit:	10 Stk.
Art.-Nr.:	4755
Maße:	H: 58 x B: 58 x T: 163 mm
PZN:	11535394



QUICKCLEAN WUNDREINIGUNGSTÜCHER MIT WANDHALTERUNG

Praktische Wandhalterung mit 40 Stück Wundreinigungstüchern zur schnellen und hygienischen Reinigung kleinerer Wunden und Schnittverletzungen. Jedes Tuch ist einzeln abgepackt und enthält steriles Wasser. Zur Anbringung direkt am Arbeitsplatz. Maße der Tücher 130 x 200 mm.

Versandeinheit:	6 x 40 Stk.
Art.-Nr.:	5550
PZN:	9534163



ERSTE-HILFE STATION

Wandstation mit Plum Augenspülung, QuickFix Pflasterspender, QuickClean Wundreinigungstücher, Spiegel und Pikto-gramm.

INHALT:

1 x 500 ml Plum Augenspülung	
1 x 40 Stk. QuickClean Wundreinigungstücher	4604
1 Stk. QuickFix Pflasterspender mit 45 elastischen und 45 wasserfesten Pflastern	5551
	5507

Versandeinheit:	1 Stk.
Art.-Nr.:	5101
Maße:	H: 300 x B: 515 x T: 85 mm
Pflastergröße:	72 x 25 mm
PZN:	9534128



STATION MIT 1000 ML PH NEUTRAL

Wandstation mit 1.000 ml pH Neutral, für die schnelle Neutralisierung von Säuren und Alkali auf der Haut. Ausgestattet mit einem speziellen Sprühkopf, der eine gleichmäßige Verteilung der Flüssigkeit über eine große Körperfläche gewährleistet. Lässt sich an nahezu jedem gefährdeten Arbeitsplatz montieren und benötigt keinen Wasseranschluss. Lieferung mit Piktogramm und Staubkappe auf der Flasche.

Spülzeit:	ca. 2 Min.
Versandeinheit:	1 Stk.
Art.-Nr.:	4741
Maße:	H: 300 x B: 160 x T: 95 mm
PZN:	4397454



AUGEN-NOTFALLSTATION

Wandstation mit 200 ml pH Neutral und 500 ml Plum Augenspüllösung. Mit integriertem Piktogramm, Spiegel und beiliegendem Augen-Notfallplan. Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Säuren oder Alkali sowie Fremdkörper in das Auge gelangen können.

Spülzeit:	pH Neutral ca. 2 Min. Plum Augenspüllösung ca. 5 Min.
Versandeinheit:	1 Stk.
Art.-Nr.:	4770
Maße:	H: 290 x B: 228 x T: 80 mm
PZN:	0622871



AUGEN-NOTFALLSTATION DUO

Wandstation mit 1 x 500 ml pH Neutral Duo und 1 x 1000 ml Plum Augenspüllösung Duo zum gleichzeitigen Spülen beider Augen. Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Säuren und Alkali sowie Fremdkörper in das Auge gelangen können. Lieferung mit Spiegel und Piktogramm

Spülzeit:	pH Neutral ca. 2 Min. Plum Augenspüllösung ca. 5 Min.
Versandeinheit:	1 Stk.
Art.-Nr.:	4803
Maße:	H: 375 x B: 2350x T: 95 mm
PZN:	6134581



AUGEN-NOTFALLSTATION IN WANDBOX

Staubgeschützte Wandbox aus Polystyrol mit 200 ml pH Neutral und 500 ml Plum Augenspüllösung. Mit innenseitigem Spiegel. Lieferung inklusive Augen-Notfallplan. Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Säuren oder Alkali sowie Fremdkörper in das Auge gelangen können und wo Staub und Schmutz anfallen.

Spülzeit:	pH Neutral ca. 2 Min. Plum Augenspüllösung ca. 5 Min.
Versandeinheit:	1 Stk.
Art.-Nr.:	4789
Maße:	H: 280 x B: 230 x T: 110 mm
PZN:	0622865



PLUM COMBIBOX DUO

Staubgeschützte Wandbox aus Polystyrol mit 500 ml pH Neutral DUO und 500 ml Plum Augenspüllösung DUO mit innenseitigem Spiegel. Für die gleichzeitige Spülung beider Augen. Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Säuren oder Alkali sowie Fremdkörper in das Auge gelangen können und wo Staub und Schmutz anfallen.

Spülzeit:	pH Neutral ca. 2 Min. Plum Augenspüllösung ca. 2 Min.
Versandeinheit:	1 Stk.
Art.-Nr.:	4862
Maße:	H: 280 x B: 230 x T: 110 mm
PZN:	11535365



AUGEN-NOTFALLSTATION DUO IN WANDBOX

Staubgeschützte Wandbox aus Polystyrol mit 500 ml pH Neutral DUO und 1000 ml Plum Augenspüllösung mit innenseitigem Spiegel. Für die gleichzeitige Spülung beider Augen. Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Säuren oder Alkali sowie Fremdkörper in das Auge gelangen können und wo Staub und Schmutz anfallen.

Spülzeit:	pH Neutral ca. 2 Min. Plum Augenspüllösung ca. 5 Min.
Versandeinheit:	1 Stk.
Art.-Nr.:	4810
Maße:	H: 357 x B: 252 x T: 116 mm
PZN:	6585289

BEHEIZBARE AUSFÜHRUNG LIEFERBAR.
NÄHERE INFORMATIONEN AUF ANFRAGE

Art.-Nr.:	4664
------------------	------



Quick FIX



QUICKFIX IST EIN EINZIGARTIGER SPENDER:

- Bietet sofortigen und sichtbaren Zugang zu Pflastern
- Löst die meisten Unfälle schnell, leicht und hygienisch
- Jedes Pflaster ist einzeln verpackt
- Lässt sich mit einer Hand bedienen
- Pflaster entpacken sich bei der Entnahme bereits von selbst
- Je nach Bedarf nachfüllbar
- Deutliche Anzeige bei leerem Spender
- Stoppt kleine Blutungen, auch ohne andere Pflaster zu beschmutzen
- Problemlose Anbringung aufgrund kleiner Abmessungen
- Eingebautes Regalfach zur Aufbewahrung von Kleinutensilien
- Wahlweise auch abschließbar mit beiliegendem Schlüssel



QUICKFIX ELASTIC

Pflasterspender inklusive 90 Stk. elastischen Textilgewebepflastern, die sich den Bewegungen der Haut anpassen und somit sehr angenehm zu tragen sind. Die Pflaster sind hautfreundlich und atmungsaktiv.

Versandereinheit: 1 Stk.
Art.-Nr.: 5502
Refill Art.-Nr.: 5512
Maße: H: 135 x B: 230 x T: 32 mm
Pflastergröße: L: 72 x B: 25 mm
PZN: 9534269



QUICKFIX WATER RESISTANT

Pflasterspender inklusive 90 Stk. wasserfesten Pflastern aus schützendem PE-Material. Besonders für feuchte Arbeitsbedingungen geeignet.

Versandereinheit: 1 Stk.
Art.-Nr.: 5501
Refill Art.-Nr.: 5511
Maße: H: 135 x B: 230 x T: 32 mm
Pflastergröße: L: 72 x B: 25 mm
PZN: 9534252



QUICKFIX ELASTIC & WATER RESISTANT

Pflasterspender inklusive 45 Stk. elastischen und 45 Stk. wasserfesten Pflastern für die verschiedenen Anforderungen am Arbeitsplatz.

Versandereinheit: 1 Stk.
Art.-Nr.: 5507
Refill Art.-Nr.: 5512 & 5511
Maße: H: 135 x B: 230 x T: 32 mm
Pflastergröße: L: 72 x B: 25 mm
PZN: 9534281

QuickFix für die schnelle Hilfe bei kleinen Zwischenfällen

Montieren Sie den Pflasterspender an der Wand und sparen Sie dadurch Zeit. Einfach Pflaster auf die Wunde auftragen und zurück zur Arbeit.

SCHNELLE UND HYGIENISCHE HILFE FÜR KLEINE WUNDEN

Alltäglich ereignen sich eine Vielzahl von kleinen Unfällen am Arbeitsplatz. Für die meisten Verletzungen ist ein Pflaster ausreichend und die Arbeit kann fortgesetzt werden.

Wählen Sie das richtige Pflaster für Ihren Arbeitsbereich. Oder eine Kombination. Mit den Plum Pflastern können sehr viele Arbeitsbereiche abgedeckt werden, z.B. feuchte Arbeitsumgebungen oder Lebensmittelbereiche. Lassen Sie sich nicht durch kleine Zwischenfälle aufhalten. Ziehen, auftragen und zurück zum Arbeitsplatz. QuickFix ist einfach, hygienisch und effektiv.



Ziehen Sie das Pflaster aus dem Spender. Das Pflaster ist sofort einsatzbereit...



...und kann mit einer Hand auf die Wunde aufgetragen werden



QUICKFIX DETECTABLE

Pflasterspender inklusive 90 Stk. blauen, atmungsaktiven Textilgewebepflastern mit integrierter Metallfläche, die sich mittels Metalldetektor aufspüren lassen. Besonders geeignet für die Lebensmittelindustrie.

Versandseinheit: 1 Stk.
Art.-Nr.: 5503
Refill Art.-Nr.: 5513
Maße: H: 135 x B: 230 x T: 32 mm
Pflastergröße: L: 72 x B: 25 mm
PZN: 9534275



QUICKFIX ELASTIC LONG

Pflasterspender mit 60 Stk. elastischen Fingerverbänden zum mehrfachen Herumwickeln um den Finger. Das elastische und atmungsaktive Trägermaterial passt sich den Bewegungen der Haut an und bietet einen hohen Anwendungskomfort. Für ein breites Spektrum an Schnittverletzungen und Wunden geeignet. Optimaler Halt auch bei starker Beanspruchung.

Versandseinheit: 1 Stk.
Art.-Nr.: 5528
Refill Art.-Nr.: 5508
Maße: H: 135 x B: 230 x T: 32 mm
Pflastergröße: L: 120 x B: 20 mm
PZN: 9534393

WÄHLEN SIE AUS DREI PFLASTERTYPEN UND ZWEI LÄNGEN

QUICKFIX ELASTIC

Elastisches, atmungsaktives Textilgewebepflaster, das sich den Bewegungen der Haut anpasst und somit angenehm zu tragen ist.

QUICKFIX WATER RESISTANT

Wasserfestes Pflaster aus schützendem PE-Material, das besonders für feuchte Arbeitsumgebungen geeignet ist.

QUICKFIX DETECTABLE

Optisch auffällige blaue, atmungsaktive Textilgewebepflaster mit integrierter Metallfläche, die sich mittels eines Metalldetektors aufspüren lassen. Besonders geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich.

QUICKFIX LONG

Extra langes Pflaster, das sich mehrfach um den Finger herumwickeln lässt. Dadurch klebt es besonders gut und hält noch länger.



QUICKFIX DETECTABLE LONG

Pflasterspender mit 60 Stk. detektierbaren Fingerverbänden zum mehrfachen Herumwickeln um den Finger. Dank der integrierten Metallfläche sind die Pflaster durch Metalldetektoren aufspürbar. Optimale Haltbarkeit auch bei starken Beanspruchungen in hygienisch sensiblen Bereichen. Das elastische und atmungsaktive Trägermaterial passt sich den Bewegungen der Haut an und bietet einen hohen Anwendungskomfort.

Versandseinheit: 1 Stk.
Art.-Nr.: 5529
Refill Art.-Nr.: 5509
Maße: H: 135 x B: 230 x T: 32 mm
Pflastergröße: L: 120 x B: 20 mm
PZN: 9535292



QUICKFIX&RINSE

Spender mit 45 Stk. atmungsaktiven, elastischen Textilgewebepflastern und 5 Stk. Augenspülampullen mit je 20 ml steriler Natriumchloridlösung (0,9%) . Der Spender bietet schnelle, einfache und hygienische Erste-Hilfe bei kleinen Unfällen und die Möglichkeit, Pflaster sowie Augenspülung nach Bedarf zu kombinieren.

Versandereinheit:	1 Stk.
Art.-Nr.:	4631
Refill Art.-Nr.:	5502 & 5160
Maße:	H:190 x B:230 x T:32 mm
Pflastergröße:	72 x 25 mm
PZN:	10987875



QUICKRINSE

Spender mit 10 Stk. Augenspülampullen mit je 20 ml Natriumchloridlösung (0,9%). Der Spender bietet schnelle, einfache und hygienische Hilfe zum Ausspülen von Fremdkörpern aus dem Auge.

Versandereinheit:	1 Stk.
Art.-Nr.:	4632
Refill Art.-Nr.:	5160
Maße:	H:135x B:230 x T:32 mm
PZN:	10987881



QuickRinse für die kleineren Unfälle

Eine wirtschaftliche Lösung für die kleinen Unfälle

BENUTZEN SIE QUICKRINSE FÜR EINE KLEINE SPÜLUNG

Das Auge ist sehr empfindlich. Daher können auch kleinere Unfälle zu ernsthaften Schmerzen und Lichtempfindlichkeit führen. Die Lösung ist, den Fremdkörper aus dem Auge zu spülen. Manchmal ist aber eine 500 ml Flasche etwas zu viel Flüssigkeit und es reicht eine kleine Menge. Für diese Situation sollten Sie QuickRinse benutzen, um Staub oder Schmutz aus dem Auge zu spülen.


Bitte beachten Sie, dass Sie unsere QuickFix Pflaster ebenfalls bei Bedarf in den Spender einsetzen können.

Jederzeit griffbereit zur Hand

Praktische Lösungen - Schnelle Erste-Hilfe

IDEAL FÜR DEN MOBILEN EINSATZ

Unsere Pflaster und Augenspülampullen sind auch in kleinen, handlichen Verpackungsgrößen erhältlich. Die praktischen Spenderpackungen können z.B. im Werkzeugkasten, im Auto, im LKW, in der Jackentasche oder im Notfallkoffer mitgeführt werden und sind dadurch immer schnell zur Hand. So sind Sie gut auf die kleinen unangenehmen Überraschungen im Alltag vorbereitet.

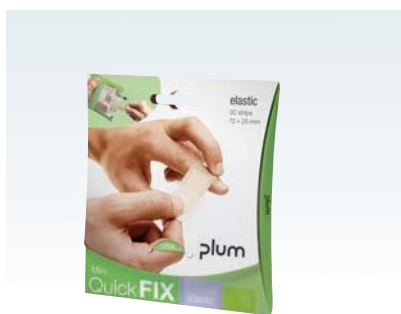

QUICKFIX MINI

Kleine und praktische Verpackung mit 30 Stk. elastischen Pflastern. Ideal zum Mitführen im Werkzeugkasten, im Handschuhfach, in der Jacken – oder Kitteltasche und auch im Notfallkoffer. Das elastische und atmungsaktive Trägermaterial passt sich den Bewegungen der Haut an und bietet einen hohen Anwendungskomfort. Alle Pflaster sind hygienisch einzeln verpackt. Sie entpacken sich bei der Entnahme von selbst und können sofort auf die Wunde aufgetragen werden.

Versandeinheit: 30 x 30 Stk.
Art.-Nr.: 5504
Pflastergröße: L: 72 x B: 25 mm
PZN: 9534298



QUICKRINSE MINI

Kleine und praktische Verpackung mit 4 Augenspülampullen mit jeweils 20 ml 0,9 % steriler Natriumchloridlösung. Die Ampullen bieten schnelle, einfache und hygienische Hilfe bei kleineren Irritationen im Auge durch Staub, Schmutz o.ä.. Durch die handliche Taschengröße kann die Verpackung bequem mitgeführt werden und ist so bei Bedarf jederzeit schnell griffbereit.

Versandeinheit: 5 x 4 Stk.
Art.-Nr.: 4619
PZN: 11029509



GÜRTELTASCHE FÜR 200 ML FLASCHEN

Die praktische Tasche kann am Gürtel befestigt werden und schützt die Flaschen vor äußeren Verschmutzungen. Im Erste-Hilfe Fall sehr leicht und schnell zu öffnen. Ausgestattet mit einem Klettverschluss und Kennzeichnung der Augenspüleinrichtung.

Versandeinheit: 10 Stk.
Art.-Nr.: 4692
PZN: 4397460



QuickSafe® bietet Ihnen schnelle, einfache und sichere Erste-Hilfe

Mit QuickSafe® gestalten Sie Ihre Erste-Hilfe übersichtlich und mit System.

HIER ERHALTEN SIE EINE MASSGESCHNEIDERTE ERSTE HILFE WANDSTATION

Stellen Sie sich Ihre Wandstation nach Bedarf zusammen. Augenspülung mit oder ohne pH Neutral. Pflaster, die Ihrer Arbeitssituation entsprechen. Wundreinigungstücher zur Reinigung von kleinen Wunden. Verbrennungsgel für die Erste-Hilfe bei kleineren Verbrennungen. Augenspülampullen für kleine Irritationen im Auge. Wundverband mit Kompressen, um Blutungen zu stoppen.

” DIE WICHTIGSTEN ERSTE-HILFE UTENSILIEN AN EINEM PLATZ

Spæncom A/S ist ein führender Anbieter von Betonelementen. Für die Augensicherheit der über 500 Mitarbeiter hat man sich für die QuickSafe® Box von Plum entschieden. “Wir haben uns für die QuickSafe® Box entschieden, da wir den Bedarf an Erste-Hilfe Produkten an die einzelnen Arbeitsplätze anpassen können. In den Bereichen, in denen wir Betonelemente mit Chemikalien behandeln, können wir Plum Augenspülflaschen und pH Neutral platzieren. QuickSafe® beinhaltet die wichtigsten Produkte. Wir haben somit alles griffbereit zur Hand und der transparente Deckel macht es sehr übersichtlich.” Jany Johannsen, Umwelt- und Sicherheitskoordinator





500 ml Plum Augenspülung

200 ml pH Neutral

500 ml Plum Augenspülung

QuickFix

Erste-Hilfe griffbereit an einem Platz

Leichte Zugänglichkeit ermöglicht höhere Sicherheit

QuickSafe® ist eine moderne Systemlösung, die die wichtigsten Erste-Hilfe Produkte griffbereit an einem Platz vereint.

Der transparente Klappdeckel sorgt für Überblick und schnellen, leichten Zugriff. Nachfüllbedarf ist sofort zu erkennen. Mit einem staubgeschützten Gehäuse und einzeln verpackten Produkten ist QuickSafe® eine hygienische und praktische Lösung.



QuickSafe® EMPTI

HIER KÖNNEN SIE SELBST BESTIMMEN

Wenn Sie Ihren Bedarf an Erste-Hilfe Artikeln selber bestimmen möchten, starten Sie mit einer leeren Wandstation und befüllen Sie diese exakt nach Ihren Wünschen.



KAUFEN SIE EINE STATION UND BEFÜLLEN SIE DIESE NACH BEDARF

Sie starten mit einer Wandstation und befüllen diese mit Augenspülflaschen und anderen Erste-Hilfe Produkten. Selbstverständlich können Sie sich auch für eine der vier kundenspezifischen QuickSafe® Lösungen entscheiden, die wir auf den nächsten Seiten präsentieren.

Versandereinheit:	1 Stk.
Art.-Nr.:	5173
Maße:	H: 430 x B: 253 x T: 92 mm
PZN:	10066371



SCANNEN SIE DEN CODE ODER GEHEN SIE AUF WWW.PLUM-QUICKSAFE.DE, UM ZU SEHEN, WIE LEICHT UND FLEXIBEL ERSTE HILFE SEIN KANN.





QuickSafe® BASIC

EIN GUTER AUSGANGSPUNKT

Mit der QuickSafe® Basic können Sie selbst entscheiden mit welchen Produkten Sie die oberen Fächer befüllen möchten. Damit haben Sie vollständige Flexibilität.



HABEN SIE SPEZIELLE ANFORDERUNGEN AN IHRE ERSTE-HILFE WANDSTATION?

Kern des gesamten QuickSafe® Programms sind unsere bewährten Augenspüllösungen. QuickSafe® Basic ist bestückt mit Plum Augenspülung, pH Neutral, Augenspülampullen und Pflastern. Die Bestückung der oberen Fächer können Sie selbst festlegen und so den Bedürfnissen an Ihren Arbeitsplatz anpassen.

INHALT:	Art.-Nr.
2 x 500 ml Plum Augenspülung	4604
1 x 200 ml pH Neutral	4752
5 x 20 ml QuickRinse Augenspülampullen	5160
1 x QuickFix Refill mit 45 elastischen Pflastern	5512

Versandereinheit:	1 Stk.
Art.-Nr.:	5170
Maße:	H: 430 x B: 253 x T: 92 mm
PZN:	10066342



QuickSafe® COMPLETE

DIE KOMPLETTE LÖSUNG

Augenspülung inklusive pH Neutral und Augenspülampullen, Wundverband mit Kompressen, Wundreinigungstücher, Pflaster und Verbrennungsgel für die Erste-Hilfe bei kleineren Verbrennungen.



SCHNELLE HILFE IST DOPPELTE HILFE

QuickSafe® Complete ist mit einer breiten Palette an Erste-Hilfe Produkten bestückt. Eine gute All-round-Lösung, die in den meisten Situationen hilft.

INHALT:	Art.-Nr.
18 x QuickCool Verbrennungsgel	5150
1 x QuickStop Wundverband Set:	5152
1 Komresse 17 x 17 cm und	
2 Kompressen 12 x 7,5 cm	
20 x QuickClean Wundreinigungstücher	5151
2 x 500 ml Plum Augenspülung	4604
1 x 200 ml pH Neutral	4752
5 x 20 ml QuickRinse Augenspülampullen	5160
1 x QuickFix Refill mit 45 elastischen Pflastern	5512

Versandereinheit:	1 Stk.
Art.-Nr.:	5174
Maße:	H: 430x B 253 x T: 92 mm
PZN:	10066365



QuickSafe® FOOD INDUSTRY

FÜR LEBENSMITTELINDUSTRIE

Erste-Hilfe Wandstation mit relevantem Inhalt für den speziellen Bedarf in der Lebensmittelindustrie.



SCHNELLE UND SICHERE HILFE

Eine Erste-Hilfe Wandstation speziell für Lebensmittelbetriebe, Küchen, Kantinen und Restaurants. Einschließlich blauer, detektierbarer Pflaster, Wundreinigungstücher, Verbrennungsgel und Wundverband-Set.

INHALT:	Art.-Nr.
18 x QuickCool Verbrennungsgel	5150
1 x QuickStop Wundverband Set:	5152
1 Komresse 17 x 17 cm und	
2 Kompressen 12 x 7,5 cm	
20 x QuickClean Wundreinigungstücher	5151
2 x 500 ml Plum Augenspülung	4604
1 x 200 ml pH Neutral	4752
1 x QuickFix Refill mit 45 detektierbaren Pflastern	5513
1 x QuickFix Refill mit 30 detektierbaren Fingerverbänden	5509

Versandereinheit:	1 Stk.
Art.-Nr.:	5175
Maße:	H: 430 x B: 253 x T: 92 mm
PZN:	10181468



QuickSafe® CHEMICAL INDUSTRY

STARKE LÖSUNG FÜR CHEMISCHE SUBSTANZEN

Unfälle mit Säuren oder Alkali können schwerwiegende und lebenslange Folgen für den Verletzten mit sich bringen.



WENIGE SEKUNDEN KÖNNEN ENTSCHEIDEN

Bei einem Unfallrisiko, mit Säuren und Alkali in Kontakt zu kommen, ist das Vorhandensein von effektiven und mobilen Augenspüllösungen äußerst wichtig. Bestückt u.a. mit pH Neutral DUO zum gleichzeitigen Spülen beider Augen.

INHALT:	Art.-Nr.
1 x 500 ml Plum Augenspülung DUO	4861
1 x 500 ml pH Neutral DUO	4801
1 x 200 ml pH Neutral	4752
5 x 20 ml QuickRinse Augenspülampullen	5160
1 x QuickFix Refill mit 45 elastischen Pflastern	5512

Versandereinheit:	1 Stk.
Art.-Nr.:	5171
Maße:	H: 430 x B: 253 x T: 92 mm
PZN:	10066359



QUICKSTOP

Steriles Wundverband Set mit integrierten Kompressen. Elastisch, nicht klebend und hautfreundlich. QuickStop ist als Druck-, Deck- und Stützverband universell einsetzbar. Bei stärkeren Blutungen können die kleinen Wundverbände als zusätzliche Kompresse verwendet werden.

Inhalt:

1 Stk. Wundverband mit Kompresse
17x17cm

2 Stk. Wundverband mit Kompressen
12x7,5 cm

Versandereinheit: 6 x 3 Stk.
Art.-Nr. 5152
PZN: 10066313



QUICKCLEAN WUNDREINIGUNGSTÜCHER

Box mit 40 Stück Tüchern für die Wundreinigung. Jedes Tuch ist einzeln abgepackt und enthält steriles Wasser. Für den Einzeleinsatz und als Refillbox für die Wandhalterung geeignet. Maße der Tücher 130 x 200 mm

Versandereinheit: 11 x 40 Stk.
Art.-Nr. 5551
PZN: 9534217



QUICKCLEAN

20 Wundreinigungstücher zur Reinigung von kleineren Wunden und Schnittverletzungen. Jedes Tuch ist einzeln verpackt und enthält steriles Wasser. Zum Einzeleinsatz oder zur Nachfüllung der QuickSafe Box geeignet.

Versandereinheit: 6 x 20 Stk.
Art.-Nr. 5151
PZN: 10066307



QUICKCOOL

18 Sachets mit Verbrennungsgel für die Erste Hilfe bei kleineren Verbrennungen und Verbrühungen. Wirkt kühlend und schmerzlindernd. Enthält Teebaumöl. Zum Einzeleinsatz oder zur Nachfüllung der QuickSafe Box.

Versandereinheit: 6 x 18 Stk.
Art.-Nr.: 5150
PZN: 10066299

Übersicht der Refills

Achten Sie auf die Nachbestückung

Unser Produktsortiment ist flexibel und passt sich Ihrem Bedarf an. Mit den Refills können Sie die QuickSafe® Box und die QuickFix Systeme einfach und unkompliziert nachbestücken.

Sollten sich die Anforderungen am Arbeitsplatz geändert haben, können Sie individuell und flexibel auch andere Refills einsetzen.



QUICKFIX WATER RESISTANT REFILL

45 Stk. wasserfeste Pflaster, besonders für feuchte Arbeitsumgebungen geeignet. Die Pflaster sind aus schützendem PE-Material hergestellt.

Versandereinheit: 6 x 45 Stk.
Art.-Nr.: 5511
Pflastergröße: L: 72 x B: 25 mm
PZN: 9534335



QUICKFIX ELASTIC REFILL

45 Stk. elastische Textilgewebepflaster, die sich den Bewegungen der Haut anpassen und somit sehr angenehm zu tragen sind. Die Pflaster sind besonders atmungsaktiv

Versandereinheit: 6 x 45 Stk.
Art.-Nr.: 5512
Pflastergröße: L: 72 x B: 25 mm
PZN: 9534312



QUICKFIX DETECTABLE REFILL

45 Stk. optisch auffällige blaue Pflaster mit integrierter Metallfläche, die sich mittels eines Metalldetektors aufspüren lassen. Die Pflaster sind aus atmungsaktivem Textil-Material hergestellt.

Versandereinheit: 6 x 45 Stk.
Art.-Nr.: 5513
Pflastergröße: L: 72 X B: 25 mm
PZN: 9534341



QUICKFIX ELASTIC LONG REFILL

30 Stk. elastische Fingerverbände zum mehrfachen Herumwickeln um den Finger. Das elastische und atmungsaktive Trägermaterial passt sich den Bewegungen der Haut an und bietet einen hohen Anwendungskomfort.

Versandereinheit: 6 x 30 Stk.
Art.-Nr.: 5508
Pflastergröße: L: 120 x B: 20 mm
PZN: 9535300



QUICKFIX DETECTABLE LONG REFILL

30 Stk. optisch auffällige blaue detektierbare Fingerverbände mit integrierter Metallfläche, die sich mittels Metalldetektor aufspüren lassen. Besonders für die Lebensmittelindustrie geeignet. Die langen Fingerverbände lassen sich mehrfach um den Finger herumwickeln.

Versandereinheit: 6 x 30 Stk.
Art.-Nr.: 5509
Pflastergröße: L: 120 x B: 20 mm
PZN: 9535323



QUICKRINSE REFILL

5 Stk. Augenspülpumpen mit 20 ml 0,9 % steriler Natriumchloridlösung zum Ausspülen von Staub, Schutz etc. Zur Nachfüllung der QuickSafe Box, QuickRinse und QuickFix&Rinse Spender.

Versandereinheit: 4 x 5 Stk.
Art.-Nr.: 5160
PZN: 10066336





PROTECTING YOU SINCE 1953

Arsitec AG

Industrie Neuhof 25
3422 Kirchberg BE

Tel. (D) 034 427 00 58

Tel. (F) 022 318 00 58

Fax 034 427 00 68

info@arsitec.ch

www.arsitec.ch

